



Prodotti riabilitativi -
per una maggiore mobilità
nella vita quotidiana

Mobilità significa libertà - con un'auto su misura.

KIRCHHOFF Mobility è uno dei principali specialisti in Europa nella conversione di veicoli per persone con mobilità ridotta. Con la nostra competenza e la nostra pluriennale esperienza, vi supportiamo dalla A alla Z – dalla consulenza alla consegna del veicolo,

fino alla manutenzione delle trasformazioni. Siamo sempre al vostro fianco con la nostra professionalità. Approfittate anche voi del nostro valore aggiunto in termini di servizio e qualità!

I vostri vantaggi in sintesi:

- ✓ **Il vostro referente personale. Consulenza individuale in loco da parte dei nostri specialisti**
- ✓ **Formazione del personale e sui prodotti in loco. Direttamente presso la vostra sede**
- ✓ **Supporto attivo in occasione di fiere ed eventi**
- ✓ **Ampia rete di assistenza e vendita 8 sedi in tutta la Svizzera**
- ✓ **Veicoli dimostrativi Presso numerose sedi (partner)**
- ✓ **Veicoli a noleggio e di cortesia officina Per conducenti attivi e passivi**

La vostra persona di riferimento



Pascal Fossa
Amministratore Delegato

+41 (0)44 928 30 10
p.fossa@kirchhoff-mobility.com



Prodotti riabilitativi



Carrozine elettriche

Balder F380	04
Balder F390	05



Sistemi di cinture

Sistema di cinture posturali Careva	06
Gilet magnetico CARFIX Easy Travel.....	07

Dettagli tecnici.....	08
------------------------------	-----------

Le nostre aree di prodotto

Pianale ribassato	Trasporto persone	Sistemi di sollevamento	Aiuti alla guida attiva
Ausili per l'imbarco	Aiuti per caricare e scaricare	Sedili e cinture speciali	Veicoli speciali e particolari
Riscaldamento supplementare	Veicoli a noleggio e sostitutivi da officina		



In sintesi

- ✓ **Design ergonomico:** Imbottitura di alta qualità e supporti per sedile, schienale e poggiatesta completamente regolabili
- ✓ **Cinque funzioni elettriche del sedile:** inclinazione fino a 45°, inclinazione anteriore fino a 15° e funzione di reclinazione
- ✓ **Elevata mobilità:** manovrabile, adattabile a diversi ambienti
- ✓ **Compatibile con i sistemi di sicurezza:** Testato contro gli urti e compatibile con diversi sistemi di aggancio per veicoli
- ✓ **Accessori opzionali:** Illuminazione LED, pneumatici neri, porta USB per la ricarica e molto altro

Il Balder F380 è una carrozzina elettrica altamente flessibile, che può essere personalizzata in base alle esigenze individuali.

Le numerose possibilità di movimento consentono di sedersi comodamente al tavolo, raggiungere facilmente aree alte e basse, nonché assumere posizioni di riposo rilassanti.

Le 5 funzioni elettriche della seduta includono un'inclinazione posteriore di 45° e un'inclinazione anteriore di 15°, garantendo una posizione ottimale in ogni situazione.

Inoltre, il sedile può essere completamente reclinato fino a una posizione distesa, rendendo il F380 una delle carrozzine elettriche più versatili sul mercato.

Il Balder F390 si distingue dalle altre carrozzine elettriche grazie alla sua esclusiva funzione di verticalizzazione. Questo modello consente un passaggio sicuro e controllato dalla posizione seduta o sdraiata a quella eretta.

Grazie ai sistemi di fissaggio integrati per torace e ginocchia, l'utente mantiene sempre una postura stabile e sicura. Anche in posizione eretta, il F390 può essere manovrato in totale sicurezza. Un sistema di sicurezza intelligente rileva eventuali irregolarità del terreno e impedisce il sollevamento in condizioni non sicure.

Oltre alla funzione di sollevamento, il F390 offre le stesse eccellenti caratteristiche di comfort e regolazione del F380, ed è completamente personalizzabile in base alle esigenze individuali.

In sintesi

- ✓ **Funzione di verticalizzazione innovativa:** Sollevamento sicuro e controllato con fissaggi stabilizzanti per torace e ginocchia.
- ✓ **Massima sicurezza:** stabilizzatori automatici per una posizione eretta sicura
- ✓ **Personalizzabile:** Ampia scelta di colori, materiali per il sedile e accessori
- ✓ **Funzioni di seduta complete:** include tutti i vantaggi del F380, con l'aggiunta della funzione di sollevamento
- ✓ **Accessori opzionali:** Illuminazione LED, pneumatici neri, porta USB per la ricarica e molto altro



Sistema di cinture posturali Careva

Gilet magnetico CARFIX Easy Travel

In sintesi

- ✓ Configurabile in modo versatile e personalizzabile grazie a diverse cinture
- ✓ Disponibile nelle taglie S, M e L
- ✓ Non richiede modifiche al sedile
- ✓ Facile da fissare
- ✓ Adatto a tutti i sedili con spazio tra sedile e schienale

Nota: il sistema di cinture posturali Careva non sostituisce la cintura di sicurezza del veicolo!

Il sistema di cinture posturali Careva supporta una postura seduta eretta ed è composto da diverse cinture individuali che possono essere combinate in modo flessibile:

- **KIT Torace:** Stabilizza la parte superiore del corpo e previene l'inclinazione laterale o in avanti.
- **KIT Bacino:** Fissa il bacino e impedisce lo scivolamento in avanti – ideale anche per passeggeri irrequieti.
- **KIT Combinato:** combina le funzioni del KIT Torace e del KIT Bacino per una stabilità completa.
- **KIT Spalle:** Supporta le persone che necessitano assistenza per mantenere una posizione eretta, garantendo il corretto funzionamento della cintura di sicurezza.
- **Crossit:** Cintura supplementare con cinghie incrociate per un sostegno supplementare e una posizione di seduta eretta.

Il gilet magnetico CARFIX Easy Travel funge da cintura di fissaggio supplementare e può essere agganciato allo schienale del sedile sia in verticale che in orizzontale.

Durante il viaggio, l'utente deve essere allacciato con la cintura di sicurezza in dotazione del veicolo. Il Gilet magnetico può essere sbloccato solo con la chiave di sblocco fornita.

In sintesi

- ✓ Omologato CE
- ✓ Disponibile nelle taglie XS, S, M, L e XL
- ✓ Montaggio e smontaggio facili
- ✓ Massimo comfort grazie ai materiali leggeri
- ✓ Lavabile a 40° C (non adatto per l'asciugatrice)

Nota: il gilet magnetico CARFIX Easy Travel non sostituisce la cintura di sicurezza del veicolo!

Dettagli tecnici

Carrozze elettriche Balder F380 & F390

	F380	F390
Larghezza	64 cm	64 cm
Lunghezza con poggipiedi ripiegati	81 cm	96 cm
Lunghezza con poggipiedi estratti	103 cm	106 cm
Larghezza del sedile	40 - 48 cm	40 - 48 cm
Profondità del sedile	40 - 52,5 cm	40 - 52,5 cm
Altezza del sedile (senza cuscino)	35 - 80 cm	35 - 80 cm
Altezza dello schienale	44 - 62 cm	44 - 62 cm
Altezza sotto il telaio	7 cm	7 cm
Distanza tra gli assi	61,5 cm	61,5 cm
Peso totale	134 kg	142 kg
Peso massimo Peso dell'utente	120 kg	120 kg
Angolo dello schienale	0° à 90°	0° à 90°
Inclinazione	-15° à 45°	-15° à 25°
Angolo del poggipiedi	0° à 90°	2° à 90°
Altezza massima dell'ostacolo	60 mm	60 mm
Velocità massima	10 km/h	10 km/h
Inclinazione massima	6°	6°
Distanza minima di frenata	1,70 m	1,70 m
Sbraccio massimo	40 km	40 km
Ruote anteriori, dimensioni	3 x 8 "	3 x 8 "
Ruote posteriori, dimensioni	2,5 x 3 "	2,5 x 3"
Ruote anteriori, pressione dell'aria	206,84 kPa	antiforatura
Ruote posteriori, pressione dell'aria	344,74 kPa	antiforatura
Diametro di sterzata	1.100 mm	1.100 mm
Batterie	62Ah 12V	62Ah 12V
Peso delle batterie	19 kg x 2	19 kg x 2

Sistema di cinture posturali Careva

Misura della cintura	Età	Lunghezza della schiena	Circonferenza del torace	Distanza tra le ossa dell'anca
Small (S)	4-8	280 - 350 mm	500 - 650 mm	Meno di 220 mm
Medium (M)	9-15	350 - 500 mm	800 - 1.100 mm	Meno di 350 mm
Large (L)	da 15	500 - 750 mm	1.100 - 1.350 mm	Meno di 450 mm

Gilet magnetico CARFIX Easy Travel

Taglia Carfix	Taglia del corpo	Lunghezza totale	Larghezza vita	Larghezza spalla
Extra Small (XS)	90 - 110 cm	40 cm	38 cm	30 cm
Small (S)	110 - 130 cm	43 cm	46 cm	31 cm
Medium (M)	130 - 150 cm	48 cm	54 cm	31 cm
Large (L)	150 - 170 cm	52 cm	60 cm	35 cm
Extra Large (XL)	170 - 190 cm	55 cm	65 cm	36 cm

Siamo qui per te -


KIRCHHOFF Mobility AG

Laubisrütistrasse 74

8712 Stäfa

Tel. +41 (0) 44 928 30 10

mail@kirchhoff-mobility.ch

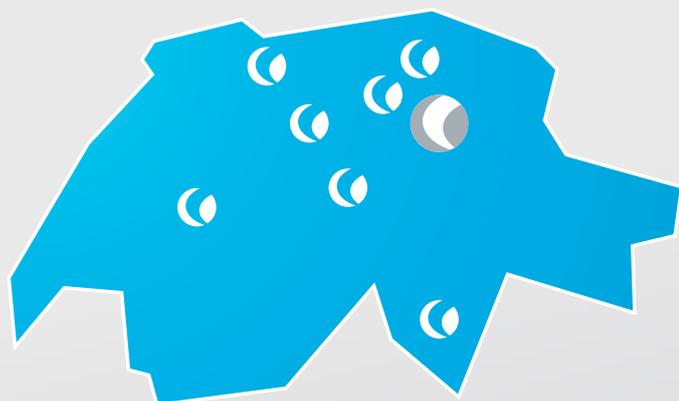

Con la gentile raccomandazione



Membro del European
Mobility Group



Siamo certificati
secondo la norma
DIN EN ISO 9001:2015

 091 829 10 89

 mail@kirchhoff-mobility.ch

 www.kirchhoff-mobility.ch

Le informazioni e i dati tecnici riportati nella brochure sono descrizioni non vincolanti. Non rappresentano proprietà garantite. KIRCHHOFF Mobility non è responsabile di errori di battitura o di trasmissione dei dati. Salvo errori e omissioni. Nella brochure possono essere mostrate immagini con accessori opzionali.



Richiedi subito
un preventivo!

 **KIRCHHOFF**
MOBILITY